



4K超高清数字视图系统集成 65"显示屏 以及IT和视频管理组件

完美浏览

手术面板SP1-654K设计用于手术室。它融入到医院的IT架构中，支持各种工作流程。SP1-654K为手术室团队提供了一个完美的视角，从手术室较远位置也可以看到。

直观的触控操作

每台CuratOR手术面板都可以配备一个触摸屏，以方便在手术室内对软件进行直观的操作。在无菌环境中使用时，戴着手套也能轻松操作。



手术面板 SP1-654K

外观定制

外观可根据客户要求定制尺寸以及粉状不锈钢和玻璃外壳材料。可以选择RAL调色板范围内的颜色以理想地适合所需的OR配色方案。

通过简单的LUT切换实现优化视图

每一个4K手术面板都配备了一个易于使用的LUT开关作为标准配置。只需按下一个按钮就可以选择五个预定义的查找表中的一个。这使得操作者能够在最佳的观察设置下显示各种医疗影像和视频。

监视器可选择范围广

手术面板有不同屏幕尺寸大小可供选择，可灵活满足本地应用要求。24"全高清HIS工作站与另一观察屏的组合为医生提供全面的观察环境，同时也节省了手术室空间。

灵活的综合视频管理VMbasic

模块化的内部设计可以实现客户的特定配置。每个4K手术面板都可以选择配备视频管理功能VMbasic。只需按下一个按钮，就可以轻松切换不同的视频信号。还有两个按钮可以选择预设布局和活动窗口。


配件和连接

手术面板标配前置USB端口，用于连接外围设备。也可以选择在前框上集成附加接口。这些可以单独连接到视频管理中可用的输入。

规格

型号		SP1-654K: 无触摸屏 SP1-654KT: 带触摸屏
外壳	材质	粉末涂层不锈钢
	正面	不锈钢和减反射安全玻璃(ESG)的组合
	颜色	有各种RAL颜色可选
	安装方案	适合嵌墙安装或表面安装
面板	规格	65"
	对角线	163.9 cm (16:9长宽比)
	面板类型	带有DICOM预设功能的彩色LCD显示屏
	原始分辨率	3840 × 2160 (超高清)
	显示颜色	显示颜色10.7亿种颜色
	像素间距	0.372 mm x 0.372 mm
	亮度 (典型值)	500 cd/m²
	对比度 (典型值)	1100:1
	可视角 (最大H / V)	178°, 178°
	响应时间 (典型值)	8.0 ms (灰阶响应时间)
	背光	LED
	信号输入	DisplayPort 1.2 x 2, DVI-D单链路, HDMI 1.4, HDMI 2.0 x 2, VGA
触摸屏		投射式电容触控屏, 多点触控 (仅限 SP1-654KT)
IT 组件		INTEL® Core™ i5 处理器 - 3.x GHz, INTEL® Chipset, 6 MB L3 高速缓存, 8 GB DDR3 RAM (可扩展), SATA 机械硬盘或SATA固态硬盘, LAN RJ 45 - 10/100/1000 Base TX
操作系统		MS Windows 10 Pro
键盘/鼠标		抗菌医用硅胶键盘, 集成鼠标操作板 (可折叠), 硅胶鼠标 (可视5键, 激光鼠标/ IP65)
输入		USB 2.0 / 3.0 x 2 (正面)
按钮	标准	主开关 (正面) 系统开关 (正面) LUT 开关 (正面)
	VMbasic (可选)	视频输入开关 (正面): DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, HDMI 1.4, VGA, DVI单链路 布局开关 (正面): PiP, PaP, LR, TB, Quadsplit, 单选择开关 (正面), 一键白屏开关 (正面)
最大功耗		287.0 W
功率要求		100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 4 - 2 A
热负荷		1033.2 kJ/h
净重		67 kg
认证及标准 (请联系EIZO中国获取最新信息)		CE, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60601-1-2, RoHS, WEEE
尺寸 (mm)	墙面开槽 (宽x高x深)	1772 x 1112 x 140
	设备 (宽x高x深)	1762 x 1102 x 120

尺寸 (mm)

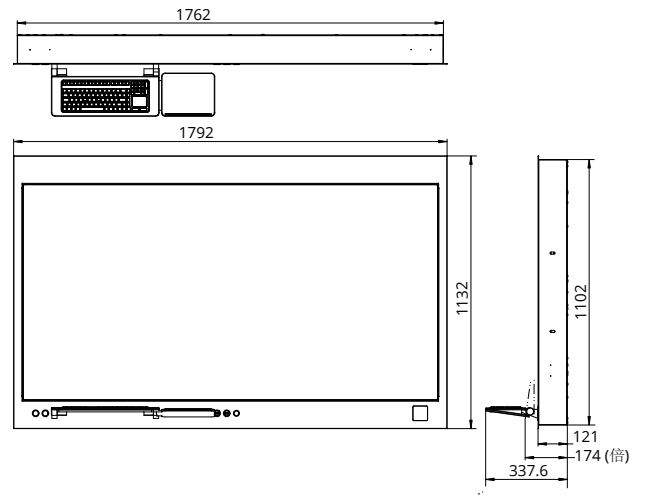

EIZO、EIZO标志和Curator均为EIZO公司在日本和其他国家的注册商标。术语HDMI和HDMI高清多媒体接口以及HDMI标志均为HDMI Licensing, LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他公司名称、产品名称和标示均为其各自所有者的商标或注册商标。
技术规格可随时变动，恕不另行通知。