

Panel PC mit Touch Funktion und vorinstallierter Bediensoftware für die Ansteuerung der EIZO Large Monitor Manager

Leicht zu bedienen

Durch die höhere Auflösung und verbesserte Touch-Reaktionsfähigkeit moderner Panel PCs ermöglicht der CID1300P eine schnelle und intuitive Auswahl von Videoquellen und vordefinierten Layouts für die Anzeige auf den im Videomanagement angeschlossenen Monitoren. Die Bedienung erfolgt direkt über das View Management des Large Monitor Managers. Zusätzlich ist eine Auswahl über die optional erhältliche und auf dem Large Monitor Manager installierte Software LMM Control möglich.



CID1300P

Einfache Integration im Video Management System

Durch die Einführung einfacher Eingabemasken sind keine speziellen IT-Administrationskenntnisse erforderlich. Der Installationsaufwand reduziert sich auf zwei Schritte: Die Einbindung in das lokale Netzwerk und die Eingabe der IP-Adresse des Video Management Systems.


Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen

Mit Sicherheitsvorkehrungen wie Servicepasswörter, gesperrte Netzwerk-Ports sowie eingeschränkter Zugang zum System ist der CID1300P für eine robuste und sichere Verwendung im OP-Umfeld ausgelegt.


Spezifikationen

Gehäuse	Material	Pulverbeschichtetes Aluminium, antibakteriell
	Farbe	Weiß
Panel	Bildschirmgröße	13,3"
	Native Auflösung	1920 x 1080
	Sichtbarer Bereich (B x H)	293 x 165 mm
	Betrachtungswinkel	178°/178°
	Helligkeit	360 cd/m ²
USB	Downstream	USB 5Gb/s: Typ A, USB 2.0: Typ A (für Anschluss von Tastatur, Maus oder Updates)
Schnittstellen	Video Ausgang	HDMI Typ A
	Audio	Audiobuchse (line-out/mic in)
	Kommunikation	Ethernet (RJ-45): 10/100/1000 Mbit/s (Anschluss an das Videomanagement Netzwerk), RS232/422/485 galvanisch isoliert bis 4 kV
HW / SW Komponenten	Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 64-bit
	IT-Komponenten	Intel Atom x5-E3930 Prozessor, SO-DIMM 4GB DDR3L RAM 1866 MHz, SSD via internal M.2 2280 slot (128 GB)
	Touchscreen	Multi-Touch (projective capacitive), Handschuh-Bedienung, Sicherheitsglas (7H) und Antireflexionsbeschichtung
Verbrauch	Spannungsversorgung	AC 100-240V: 47-63Hz Medizinisches AC-Netzteil (PSE Kennzeichnung)
	Maximale Leistungsaufnahme	65 W
Physikalische Eigenschaften	Nettogewicht	3,2 kg
	Lochabstand (VESA Standard)	VESA 100 x 100, M4 x 6 mm
Schutzart		Vorderseite: IP65 Restliches Gerät: IP21
Zertifizierungen & Standards (Aktuelle Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen EIZO-Ansprechpartner)		CE, EN55032, EN55035, EN62368-1, EN IEC63000, IEC 60601-1:2012 & EN 60601-1:2013, IEC 60601-1-2:2014 & EN 60601-1-2:2015, ANSI/AAMI ES60601-1:2005(R)2012, CSA C22.2 No. 60601-1:2014, FCC, REACH, RoHS
Zubehör im Lieferumfang (Kann je nach Land variieren, bitte kontaktieren Sie EIZO für Details)		AC Netzteil, Schraubenset, Utility Disc (PDF Gebrauchsanweisung)

Abmessungen (mm)

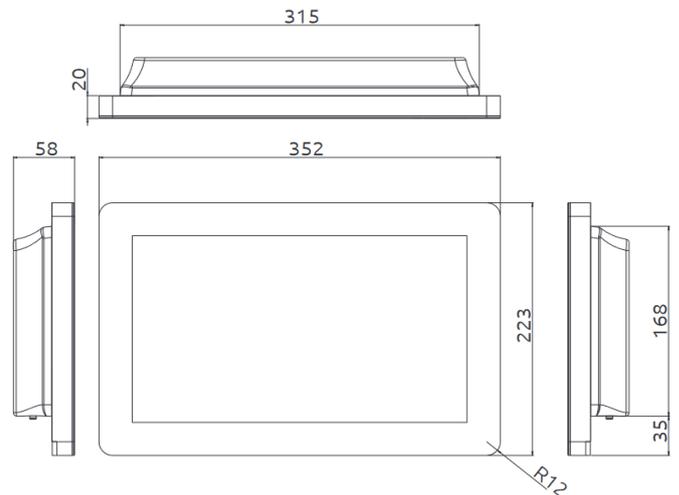

Anschlüsse

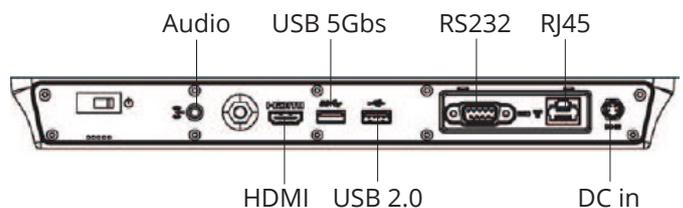

Ihren EIZO Ansprechpartner finden Sie unter:
<https://www.eizo-or.com/kontakt>

EIZO, das EIZO Logo und CuratOR sind eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan und in weiteren Ländern. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und in weiteren Ländern. Alle anderen Namen von Unternehmen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.